

Elektran jalkatuen jousien vaihto

KMOSA1100

Ohjeaika: 5 min.

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 5 mm
- Kiintoavain 17 mm



Irrota jalkatuen sähkölukon kiinnityspultti.
(kuusiokoloavain 5 mm).



Ota jalkatuen sähkölukko pois.




Avaa jalkatuen kiinnityspultti.
(kiintoavain 17 mm).



Ota jalkatuki pois.



Ota jalkatuen jouset pois.

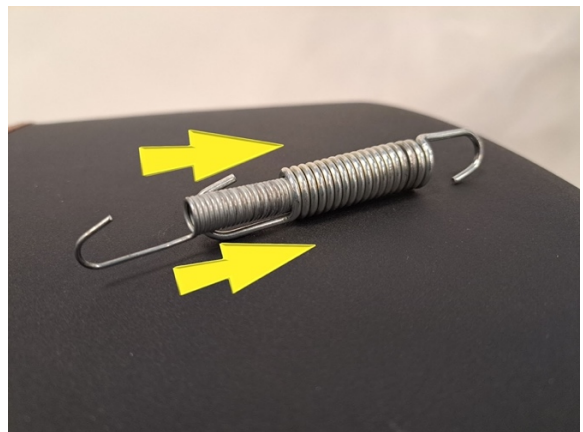

Asenna uudet jouset sisäkkäin.

Muuten uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.