

## Siverfox Four kyynärnojan kiinnikkeiden yhdyskappaleen vaihto

Ohjeaika: 20 min.

KMJCFXOSA019

### Tarvittavat työkalut:


- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm
- Pihdit
- Kiintoavain 10 mm




Avaa penkkilukko avaimella.



Nosta penkki ylös.

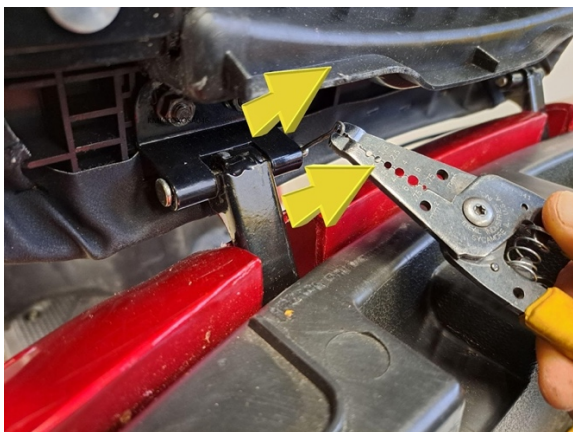

Ota penkin saranoiden sokat pois kummaltakin puolelta. (pihdit).

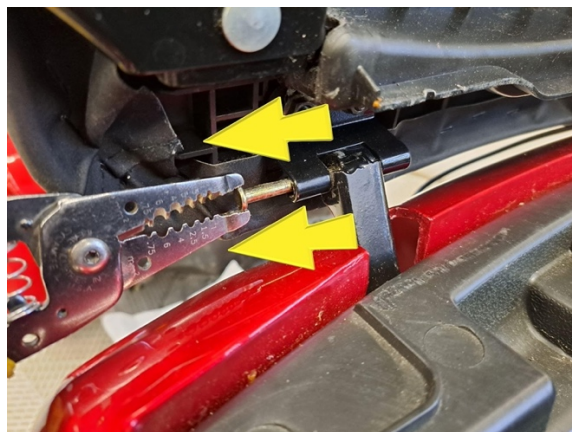

Ota penkin saranatapit pois.



Nosta penkki pois ja käännä penkki ylösalaisin.



Irrota kyynärnojan kiinnikkeiden Yhdyskappaleen kiinnitysruuvit (ristipäämeisseli ph2) joilla on vastamutterit. (kiintoavain 10 mm).



Ota kyynärnojan kiinnikkeiden yhdyskappale pois.

**Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.**