

Autokruiser kytkentärasian vaihto

KMOSA0271

Ohjeaika: 20 min.

Tarvittavat työkalut:

- Ristipäämeisseli ph2
- Räikkä ja hylsy 8 mm



Paina päävirtakytkin kiinni.




Käytä virta-avaimella virrat päällä noin 15 sekuntia päävirtakytkimen ollessa kiinni, jotta ohjainlaitteen jännösvirta purkautuu.




Irrota istuimen kiinnityspultit (hylsy 8 mm) kummaltakin puolelta.




Nosta istuin pois.

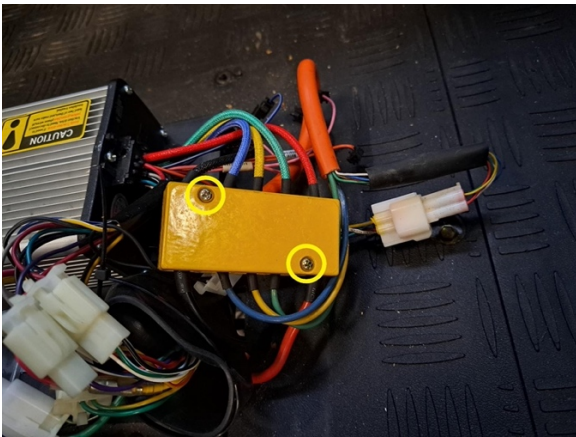


Irrota kytkentärasian kannen kiinnitysruuvit.
(ristipäämeisseli ph2).

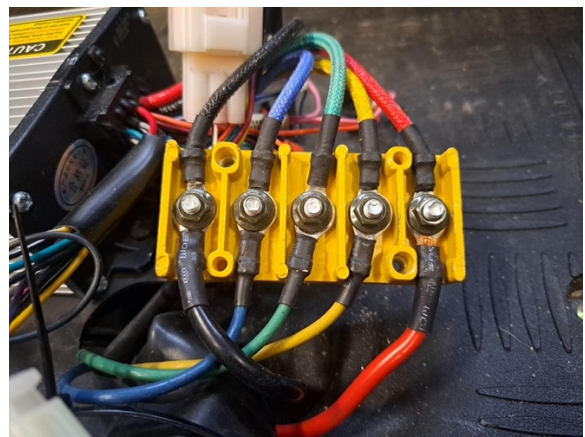

Irrota päävirtajohtimien ja moottorin
vaihejohtimien kiinnitysmutterit.
(hylsy 8 mm).

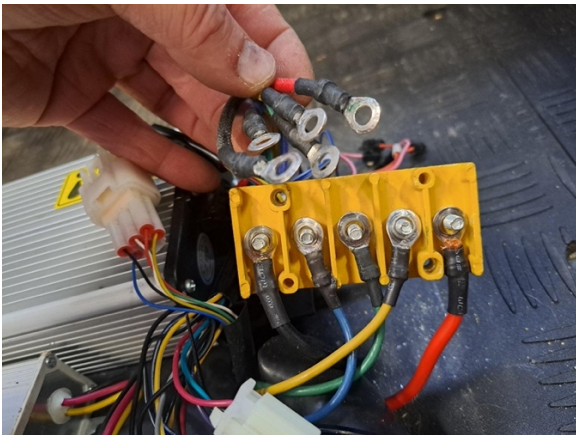

Ota ohjainlaitteelle menevät johdot pois kytkentärasiaista.

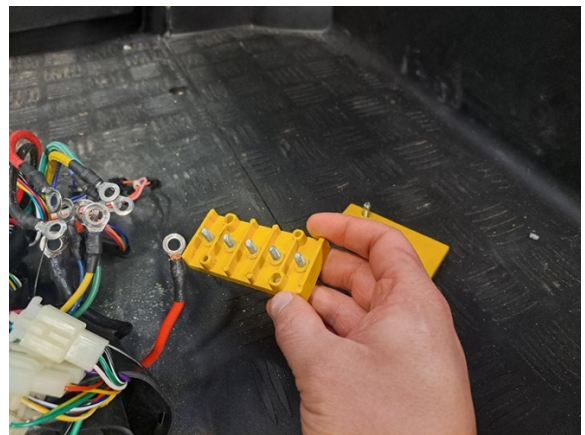

Uuden osan asennus käänteisessä järjestyksessä.